

all'Audioprotesista



Inventis Trumpet

è un sistema avanzato per il **fitting REM** di apparecchi acustici, ma anche un audiometro diagnostico. La migliore combinazione in termini di portabilità, praticità e dimensioni.



Matrix Test

Trumpet consente inoltre di eseguire il **Matrix Test**, in grado di calcolare il valore SRT tramite una procedura guidata, automatica, semplice e ripetibile, permettendo così allo specialista di individuare la migliore protesi acustica da utilizzare per la riabilitazione del paziente.



Inventis Symphonia

I risultati della post protesizzazione saranno posti in risalto grazie a **Inventis Symphonia**, il software per la creazione di ambienti sonori virtuali.



TRUMPET



Trumpet è un avanzato sistema per il fitting di apparecchi acustici (REM), che consente di effettuare in maniera semplice e accurata misure in-situ, avvalendosi di leggerissime e confortevoli sonde e di un altoparlante integrato. Non solo, Trumpet è anche un audiometro diagnostico in grado di eseguire audiometrie tonali e vocali in via aerea, ossea e in campo libero. Controllato da Maestro, software unico per la gestione di tutta la strumentazione Inventis, la Verifica degli apparecchi acustici risulterà estremamente semplice e veloce!

- Misure standard di GAIN/RESPONSE, Speech mapping
- Altoparlante incorporato
- Audiometria tonale e vocale in VA, VO e campo libero (Trumpet AUD)
- Sonde wireless (opt.)

OLDENBURG INTERNATIONAL MATRIX TEST

Dato caratteristico dell'ipoacusia è la difficoltà di comprendere le parole nel rumore.

Si tratta di un dato oggettivo ma non sempre facile da rilevare con un normale esame vocale.

Scopo del **Matrix Test** è di trovare il rapporto segnale/rumore (SNR) che consente al paziente di capire il 50% delle parole (SRT, Speech Recognition Threshold). Questo mediante procedura guidata, automatica, semplice e ripetibile.

L'Oldenburg International Matrix Test è eseguibile con Inventis Trumpet!

Sarà sufficiente collegare il Trumpet con licenza audiometrica attiva al computer, selezionare il paziente dal database del software Maestro o Noah e avviare il Matrix Test.

- Misurazione automatica e affidabile dell'SRT del paziente
- Possibilità di eseguire il test ripetutamente (possono essere generate fino a 100.000 frasi diverse)
- Adatto a qualsiasi grado di ipoacusia
- Ampio portfolio linguistico



SYMPHONIA



La Tecnologia al Servizio dell'Audioprotesista

L'**innovazione tecnologica** è una componente determinante di ognuno dei prodotti Inventis.

È nostra convinzione che l'esperienza dell'audioprotesista, la passione per l'audiologia e la tecnologia, rappresentino il valore aggiunto che differenzia qualitativamente la riuscita della riabilitazione uditiva! Questo perché ogni ipoacusia è unica. **Ogni paziente è unico.**

Inventis investe sulla **Professionalità**, mettendo a disposizione dell'Audioprotesista una strumentazione **Innovativa**, tecnologicamente **Avanzata**, ma **Semplice** da utilizzare.


Symphonia è un software per la **creazione di ambienti sonori virtuali** la cui finalità è quella di valutare la comprensione verbale del paziente in condizioni di rumore, simulando le situazioni di ascolto difficile in cui ci si può trovare nella vita quotidiana.

Grazie a Symphonia sarà possibile simulare un ambiente sonoro realistico completo di rumori di sottofondo e sorgenti sonore direzionali a 360°, di cui è possibile modificare in tempo reale l'angolo e la distanza con cui vengono percepite dal paziente.

Grazie a questo sistema sarà possibile far percepire al paziente i benefici derivanti dall'utilizzo delle funzionalità avanzate degli apparecchi acustici, senza dover lasciare la stanza.

Il set up prevede una scheda audio multicanale da collegare al proprio computer e un sistema di casse.

- Simulazione di ambienti sonori
- Rumori ambientali realistici
- Sorgenti sonore direzionali personalizzabili e sovrapponibili
- Configurazione flessibile degli altoparlanti (fino a 8)

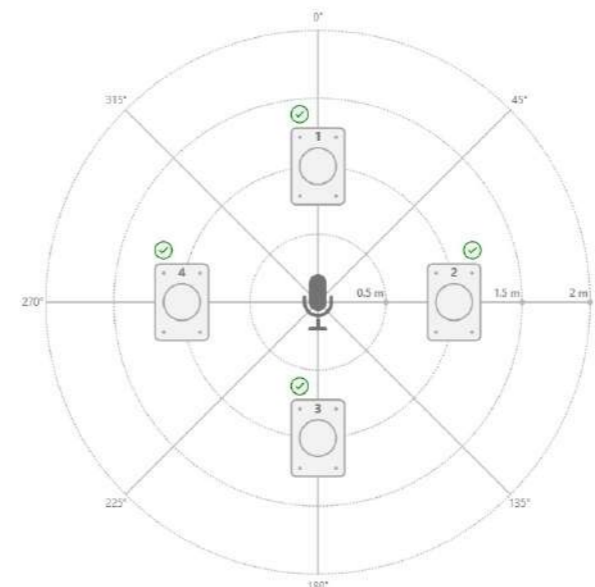

La tecnologia al Servizio dell'Audioprotesista

La visione di Inventis si unisce a quella dell'Audioprotesista, offrendo al Professionista strumenti Affidabili, Innovativi, Avanzati e Semplici allo stesso tempo: il sistema di Fitting REM e Audiometro Diagnostico **Inventis Trumpet** il quale consente anche di eseguire il **Matrix Test**, test vocale adattivo in competizione che aiuta l'Audioprotesista nella scelta della migliore protesi acustica da utilizzare per la riabilitazione del paziente.

A completare l'offerta, il sistema **Inventis Symphonia** garantirà al vostro paziente il best hearing journey, anticipando e contrastando il fastidio generato da rumori ai quali non si è più abituati.

Fitting



Trumpet

Sistema REM e Audiometro Diagnostico

Fitting



Symphonia

Simulazione di ambienti sonori realistici

Trova il tuo commerciale di zona su:

www.inventis.it



Academia è il progetto di divulgazione e approfondimento scientifico promosso da Inventis e rivolto a tutti coloro che si interessano di disturbi dell'apparato uditivo e vestibolare.

Il successo sino ad ora ottenuto è stato possibile grazie all'impegno del nostro team, al contributo di relatori, stimati Professionisti del campo dell'audiologia e della vestibologia a livello nazionale ed internazionale e all'interesse di tutti voi.

academia

academia

Condivisione. Formazione. Inventis.

Seguici sui social per restare aggiornato su tutti gli appuntamenti academia.

ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75